

CFPM300 & CFPM301 *Bildgebungstische*

- Branchenweit größter einstellbarer Höhenbereich von 26"- 44"
- 56" Metallfreier Bildgebungsbereich
- Kostengünstiger Tisch mit 3 Bewegungen
- 500 lb Patiententragfähigkeit
- Gewährleistung: 3 Jahre Teile, 2 Jahre Arbeit



Integrierter
Kopfstützenoberteil



Rechteckiger Oberteil



HÖHENBEREICH



TRENDELENBURG-NEIGUNG



LONGITUDINALBE-
WEGUNG
CFPM301




SEITENNEIGUNG
CFPM300



FM584901

made in the USA
with US & imported parts

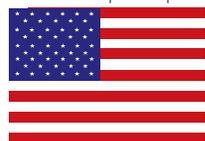

OAKWORKS[®]
MEDICAL
Position for Success

CFPM300

#75208-T01 Integriert
#75209-T01 Rechteckig

CFPM301

#75211-T01 Integriert
#75212-T01 Rechteckig


FUNKTIONSMERKMALE	
Kohlefaser-Oberteil 56" Metallfreier Bildgebungsbereich	Integrierte Kopfstütze 22"(56 cm) breit x 84" (214 cm) lang Rechteckig 24"(61 cm) breit x 80" (203 cm) lang
CFPM300 BEWEGUNGEN	
Bewegung 1	Elektrischer Höhenbereich 26"- 44" (66-112 cm)
Bewegung 2	Elektrische Trendelenburg-Neigung +15°/-12°
Bewegung 3	Elektrische Seitenneigung ± 15 °
CFPM301 BEWEGUNGEN	
Bewegung 1	Elektrischer Höhenbereich 26"- 44" (66-112 cm)
Bewegung 2	Elektrische Trendelenburg-Neigung +15°/-11°
Bewegung 3	Elektrische Longitudinalbewegung 10" (25 cm)
Bedienelemente	Multifunktions-Handsteuerung
Tragfähigkeit	500 lb (227 kg)
Produktgewicht	475 Pfund (216 kg)
Enthaltene Funktionen	1"(3 cm) strahlendurchlässiger Comfort Foam™-Tischauflagenoberteil, 4" (10 cm) Feststell-Laufrollen, sichelförmiges Gesichtskissen (im Lieferumfang enthalten mit integriertem Kopfstützenoberteil), Patienten-Sicherheitsgurte (2)
Gewährleistung	3 Jahre Teile, 2 Jahre Arbeit
Sicherheitsauflistungen	FDA-gelistet, CE-Kennzeichnung, cETLus-genehmigt, CB-Zertifikat

OPTIONEN <i>müssen mit Tisch bestellt werden.</i>		#
2" (5 cm) Tischauflage Upgrade	Upgrade von standardmäßiger 1"- (3 cm)-Auflage	73190-T01
5" (13 cm) Rollen	Upgrade von Standard 4" (10 cm)	65427
Fußsteuerung (CFPM300)	Multifunktional mit Aufnahmevorrichtung am Tischfuß	75074
Fußsteuerung (CFPM301)	Multifunktional mit Aufnahmevorrichtung am Tischfuß	75076
Nicht-amerikanisches elektrisches System	Bitte kontaktieren Sie uns für Bestelldetails	73134
ZUBEHÖR <i>jederzeit bestellen. Siehe Zubehör auf den Seiten 34-39.</i>		#
Armschlinge	Zur Verwendung mit integriertem Kopfstützenoberteil	48751-T01
Carbonfaser-Armlagerung (6" breit)	180° Schwenkwinkel	42585
Carbonfaser-Armlagerung (7,5" breit)	180° Schwenkwinkel	70337
Durchleuchtungenweiterung	Polycarbonat	33975
Interventionelles Rückenlage-Kissensystem	Konturierte Unterlage und Stützkissenpolster	69808-T01
Wirbelsäulenpositionierungssystem II	8-teiliges System	70100-T01
T-Schienenklemme	6" (15 cm) lange Schiene	63336

EINZELNE KOHLEFASER-ARMLAGERUNG

#42585-T01 - 6" breit Nr. 70337-T01 - 7,5" breit

Die Armlagerung ist vollständig strahlendurchlässig, hat einen Bewegungsbereich von 180°, benötigt keine Befestigungselemente und gleitet einfach unter den Tischauflagenoberteil. Sie kann an jedem Fluoroskopie-Tisch verwendet werden und stützt Arme und Füße in einer Vielzahl von Positionierungskonfigurationen. Zur Lagerung zusammenklappen.

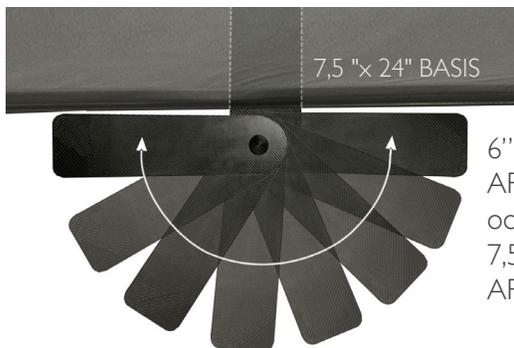

6" x 23"
ARMLAGERUNG
oder
7,5" x 24"
ARMLAGERUNG

KONTAKT:

WIRBELSÄULENPOSITIONIERUNGSSYSTEM II

#70100-T01

- **Optimale Bildgebung** Hohe Röntgentransparenz und Flexibilität für ideale Darstellung von Hals, Brust und Lendenwirbelsäule.
- **Erhöhter Patientenkomfort** Minimieren Sie unerwünschte Bewegungen und reduzieren Sie die Behandlungszeit.
- **Stabiles Design** Großes konturiertes Oberkörperkissen stützt den Patienten & der Gurt befestigt das System sicher am Tisch.



ANPASSBARE 6"-T-SCHIENENKLEMME

#63336

Die anpassbare T-Schienenklemme kann entlang der genuteten Tischoberkante positioniert werden. Die Klemme ist ebenfalls abnehmbar.

- Platz für eine Vielzahl von T-Schienen-Zubehörteilen
- Gewichtzulassung 150 lb (68 kg)



*Sehen Sie sich unser
gesamtes Sortiment
medizinischer Produkte an*



Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone

#72703



717.235.6807 www.oakworksmed.com E-Mail: customerservice@oakworks.com